

HDMIデジタルマイクロスコープ

AE2000MET-1080M

金属顕微鏡

明/暗視野,長作動距離仕様の金属顕微鏡


ステージは15kg耐荷重のため重い物でも観察できます。 23mmの広視野接眼レンズを採用し、観察効率が向上しています。



各種金属の表面観察画像





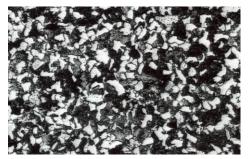

Cat.No		114-9123		
形名		AE2000MET-1080M		
価 格		¥1,379,000 (税込¥1,516,900)		
顕微鏡	総合倍率	50 ∼ 500×		
	接眼レンズ	WF10×/23mm マイクロメータ取付枠付(25mm)		
	対物レンズ	明/暗視野 プランアクロマート LWD(長焦点)5× 10× 20× 50×		
	鏡筒形式	三眼 45°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径30mm 三眼分配比率 20:80		
	焦準装置	ラックピニオン式粗動 微動装置 レボルバ上下動式		
	ステージ	XYステージ 大きさ:280×180mm 移動距離:50×50mm		
	照明装置	ハロゲン 100W		
	大きさ・重さ	約W280×D693×H361mm 約13kg		
	電源	AC100-240V 50/60Hz		
	映像出力	USB2.0/3.0 HDMI SD(SDHC 32GBまで) *SDカードは別売です		
カメ	イメージセンサ	1/2.8"型CMOS		
^ =	有効画素数	USB:1600×1200(約200万画素) HDMI:1920×1080 1080P60(約200万画素)		
		SD:1920×1080(約200万画素)		
モニタ部		11.6インチ HDMIモニタ		
対応ソフト		Motic Images Plus		
対応OS		Windows Vista / 7 / 8 /10		
付属品		接眼鏡用キャップ 三眼部キャップ ダストカバー(顕微鏡本体用) 六角レンチ(2.5mm)		
		ACアダプタ 予備ハロゲン球 ブルーフィルタ 水滴型穴開きプレート		
		ソフトウェア(Motic Images Plus) ダストキャップ 校正用スライド USBケーブル		
		HDMIケーブル ACアダプタ Cマウントリング Cマウントアダプタ(0.5×) USBマウス		



長焦点LWD対物レンズを搭載しています。



明視野 Bright Field(BF)・暗視野 Dark Field(DF)がワンタッチで切 り替え可能。暗視野/明視野切換え 時に自動的に光量を一旦落とす目に 優しい設計です。



LED照明、自動ON / OFF機能付き。 人感センサーを装備。通電時に離席 すれば一定時間でスリープモードに はいります。

- HDMI/USB同時出力が可能!モニタとPCへ同時に出力できます。
- SDカードを使用して、その場で静止画(JPEG)・ 動画(AVI)の保存が可能。
- HDMI1080P(秒60コマ)の高速表示。 可動時の画像の動きがスムーズ。

■ オプション

196839 Cマウントカメラアダプタ	0.35×	¥40,800 (税込¥44,880)
196836 Cマウントカメラアダプタ	0.5×	¥22,800(稅込¥25,080)
196837 Cマウントカメラアダプタ	0.65×	¥22,800 (税込¥25,080)
196838 Cマウントカメラアダプタ	1×	¥22,800 (税込¥25,080)

顕微鏡に関する技術的なご相談は 🚱 0120-376-673 FAX.03-6854-0275 E-mail:soudan@shimadzu-rika.co.jp

株式会社 島津理化 https://www.shimadzu-rika.co.jp/

東日本営業部 東 京 TEL 03-6854-0210 札 幌 TEL 011-758-0788

仙 台 TEL 022-380-8950

西日本営業部 大 阪 TEL 06-6375-2551 名古屋 TEL 052-857-9176

福 岡 TEL 092-271-1418

海外事業部 TEL 03-6854-0261

本 社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル