

オプション設置例



エスキース専用流し台（木製）

エスキース実験台にデザインを合わせた専用の流し台です。天板は耐薬性に優れたサイファス天板を採用、流しはステンレス製の大型タイプ、水栓は使い心地がよく、デザイン性に優れたシングルレバー湯水混合栓を標準で用意しました。収納部は折れ戸式を採用し、底板がない仕様のためカートを直接収納可能です。また、大型の透明バックガードを設置し、視認性を損なうことなく実験台への水跳ねを防ぎます。



エスキース（木製）＋ユーティリティ（例）

アームダクトなどの簡易な排気装置や、配線・配管を綺麗に収納し隠すことができるユーティリティポストを実験台へ組み込むことが可能です。ユーティリティポストやユーティリティユニットを通じて、実験台の作業性やデザイン性を崩すことなく様々な排気系統の組み込みが可能で、スタイリッシュな実験室が演出できます。

ご相談・お問い合わせは島津理化HPお問い合わせフォームから

<https://www.shimadzu-rika.co.jp/contact/index.html>



株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

支店 東京 TEL 03-6854-0210 大阪 TEL 06-6454-3133
営業所 札幌 TEL 011-758-0788 仙台 TEL 022-380-8950
名古屋 TEL 052-857-9176 福岡 TEL 092-271-1418
海外事業部 TEL 03-6854-0261

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル

多機能，省エネ，安全性。すべてを備えたフレキシブルな実験台。

研究者の自由と安全を
高いレベルで両立。

快適性を追求した最先端の実験台。



◀ エスキー実験台の動画はこちら



木製



オールスチール製



ESQ1-NL-BF4

木製実験台

中央実験台



両開き戸タイプ ESQ1-NL



デスクタイプ ESQ3-NL



大型収納引き出しタイプ ESQ5-NL



両開き戸タイプ ESQ1-NL-CA
パンチングパネルユニット付



両開き戸タイプ ESQ1-NL-BF4
試薬棚付



【オプション】
側面流し台 ESQ1-SL



ブラック ホワイト 木目調

カラーバリエーション

研究室内の色調に合わせたカラーコーディネートが可能。研究者の好みに合わせて、側面エンドパネルをブラック、ホワイト、木目調の3色から選択できます。
※標準色はブラックになります。



試薬棚用照明 (オプション対応)

試薬棚の1段目にLED照明を追加できます。照明はスリムで演色性が高いLED照明を採用しています。

サイド実験台

※試薬棚、パンチングパネルはオプションです。



両開き戸タイプ ESQ1-FA



デスクタイプ ESQ3-DA



大型収納引き出しタイプ ESQ5-PA



側面収納カート

通常デッドスペースになるユーティリティスペースを活用した取り出し型の側面収納カートが全ての実験台のタイプに標準で付属します。大型取手とキャスターによりスムーズな取り出しが可能です。

※側面に流し台を設置する場合は、設置面側のカートは付属しません。



ダストシュート (オプション対応)

側面収納カートは、研究や作業中に発生する小さな紙くず等のごみを手軽に捨てられるダストシュートに変更できます。

サイズラインナップ 中央実験台



サイド実験台は幅900/1200/1500/1800/2400/3000mmをラインナップしています。



ESQF-SNL-BF4

オールスチール製実験台

中央実験台



フラットタイプ ESQF-SNL



パンチングユニット付 ESQF-SNL-CA



試薬棚付 ESQF-SNL-BF4

サイド実験台



フラットタイプ ESQF-SS



パンチングユニット付 ESQF-SS-CA



試薬棚付 ESQF-SS-BF4



ワゴン 3段引出タイプ


サイズ: W450×D450×H680mm



天板
スチール製の天板です。表面には耐薬品性のある材質を貼付しています。



ユーティリティ
アームダクトなどの簡易な排気装置や、配線・配管を綺麗に収納し隠すことができます。ユーティリティポストやユーティリティユニットを通して、実験台の作業性やデザイン性を崩すことなく様々な排気系統の組み込みが可能です。スタイリッシュな実験室が演出できます。

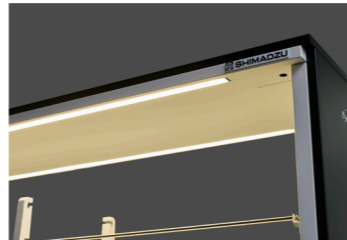

試薬棚用照明 (オプション対応)
試薬棚の最上部にLED照明を追加できます。



ワゴン
キャスター付きで自由に移動可能です。3段引出タイプです。



引き出し (オプション対応)
ソフトクローズ機構で安全な引き出しです。



中間脚なしの構造
カンチレバー構造で中間脚がなく、足元が広々としています。(W2400まで)
※耐荷重上不安があれば、オプションで補助脚を追加可能です。

サイズラインナップ 中央実験台



サイド実験台は幅1200/1500/1800/2400/3000mmをラインナップ。奥行きは750mmと900mmに対応しています。