

eSquisse

eSquisse(エスキース)とは素描、下絵、素案、概要を意味するフランス語。

作品を制作するための着想や構想を描きとめた下描きのことです。

下絵としての綿密な計画が、

豊かなアイデアとして彩色されていくように、

研究者の自由な発想と確かな成功を

サポートしたいという願いから名付けました。

eSquisse



研究者の知性を可視化する 洗練された機能デザイン

新しいアイデアを真っ白なキャンバスに描いていくように。

豊富なユニットによる高いカスタマイズ性。

白と黒のコントラストが映えるスタイリッシュなデザイン。

過不足のない機能美にこだわった

最先端のブランドがデビューしました。

eSquisse





動と静が織り成す無限の可能性

知的好奇心を触発する高いカスタマイズ性。

集中を妨げない統一感のあるデザイン。

動と静、理想と現実の融合が、創造力をアシストする。

研究の可能性と成果を最大化するための実験台が誕生しました。



ブラック



ホワイト



木目調

カラーバリエーション

研究室内の色調に合わせたカラーコーディネートが可能。研究者の好みに合わせて、側面エンドパネルをブラック、ホワイト、木目調の3色から選択できます。


※標準色はブラックになります。



側面収納カート

通常デッドスペースになるユーティリティスペースを活用した取り出し型の側面収納カートが全ての実験台のタイプに標準で付属します。大型取手とキャスターによりスムーズな取り出しが可能です。

※側面に流し台を設置する場合は、設置面側のカートは付属しません。

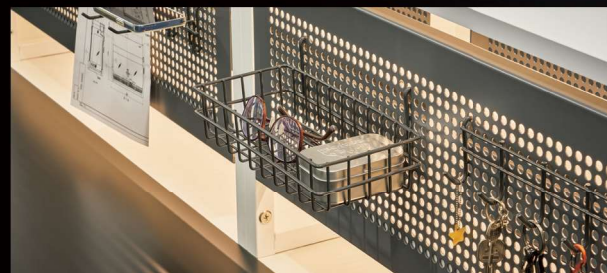

パンチングパネルユニット

脱着式のパンチングパネルにはフックやホルダーなどの取付が可能です。研究者の好みに合わせて収納や棚など自由にご使用ください。また、ユニット本体の天板はロータイプのため物置き場としても活用できます。

※パンチングパネル用のフックやホルダーは付属しません。



研究者の自由と安全を
高いレベルで両立。
快適性を追求した最先端の実験台。



エスキース専用流し台

エスキース実験台にデザインを合わせた専用の流し台です。天板は耐薬性に優れたサイファス天板を採用、流しはステンレス製の大型タイプ、水栓は使い心地がよく、デザイン性に優れたシングルレバー湯水混合栓を標準で用意しました。収納部は折れ戸式を採用し、底板がない仕様のためカートを直接収納可能です。また、大型の透明バックガードを設置し、視認性を損なうことなく実験台への水跳ねを防ぎます。

試薬棚用照明（選べます）

試薬棚の1段目にLED照明を追加できます。照明はスリムで演色性が高いLED照明を採用しています。



ダストシュート（選べます）

側面収納カートは、研究や作業中に発生する小さな紙くず等のゴミを手軽に捨てられるダストシュートに変更できます。天板のゴミ投入口は高級感のあるステンレス製の回転式を採用し、ゴミを簡単に真下のゴミ袋へ投入できます。



エスキース+ユーティリティ（例）

アームダクトなどの簡易な排気装置や、配線・配管を綺麗に収納し隠すことができるユーティリティポストを実験台へ組み込むことが可能です。ユーティリティポストやユーティリティユニットを通じて、実験台の作業性やデザイン性を崩すことなく様々な排気系統の組み込みが可能です、スタイリッシュな実験室が演出できます。

※写真は一例となります。詳細はお問い合わせください。

LINEUP



ESQ1-NL

両開き戸タイプ

ESQ1-NL18



ESQ3-NL

デスクタイプ

ESQ3-NL18



ESQ5-NL

大型引き出しタイプ

ESQ5-NL18



ESQ1-NL-CA

両開き戸タイプ

ESQ1-NL18-CA



ESQ1-NL-BF4

両開き戸タイプ

ESQ1-NL18-BF4



ESQ1-SL

エスキース用側面流し台

ESQ1-SL15



フラットな手触りで知にアクセスする

洗練された白と黒の機能美。表示と操作を同一平面に集約。

無駄な凹凸を廃したフォルムが、安全性と快適性を両立させる。

研究者の思いを結実させた最新作が、

ラボの空気をアップデートします。



ステータスバー（オプション）

運転状態の視認性を向上させる機能になります。正常時を緑、異常時を赤で点灯する事によって作業場所から離れていても安全確認ができます。

クラス最高水準の
堅牢な安全性と柔軟な機能性。
さらなる進化を遂げた
CBEシリーズ。

eSquisse




サッシ飛散防止フィルム

前面サッシにはガラスが割れ落ちることを防ぐサッシ飛散防止フィルムを貼付しています。



開口制限ストッパ

作業に安全な開口位置で前面サッシが止まり安心して作業ができます。ストッパは錠で固定することもできます。

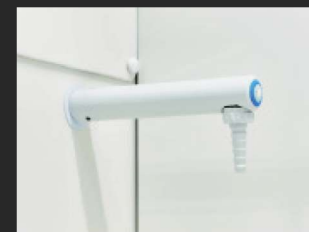

壁付水栓

遠隔操作が可能なので庫内の奥まで身を乗り出して操作する必要はありません。




遠隔操作ハンドル

180度の回転で水栓を全開または全閉にすることができます。



ユーティリティパネル

100Vコンセント、200Vコンセント、ガスコンセントが追加で取り付けできます。

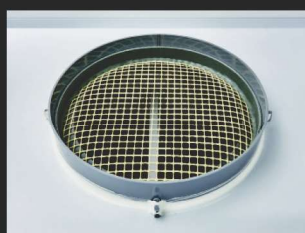

異物吸込防止ネット

誤って吸い込まれてしまった異物が設備に損害を与えることを防止します。



ワイヤ外れ防止機構

ワイヤ切断の要因となる滑車からのワイヤ外れを未然に防止します。



落下防止機構

万が一ワイヤが切断しても、開口範囲の任意の位置で前面サッシがロックされ事故を防ぎます。



操作パネル・表示パネル

タッチパネル式の多機能型操作パネルを採用し、RoHS指令にも対応しています。



エアホイル

エアホイル形状を見直すことにより手元の乱流を改善・抑制しました。

LINEUP



CBE-Sc
標準型



CBE-SL
スローピング型



CBE-LH
低高型



CBE-LF
低床型



CBE-Vc
湿式スクラパー横置き型



CBE-Zc
湿式スクラパー搭載型



CBE-DAc
乾式スクラパー横置き型



CBE-DBc
乾式スクラパー搭載型



CBE-WH
合成研究用



CBE-Co
コンビネーションサッシ型



CBE-Df
卓上型



CBE-Hc
酸用



CBE-Ts
ステンレス内装型



CBE-Uc
ウォークイン型



CBE-ScW
両面型



CBE-LV
低風量型