

Tablet scope


タブレットスコープ 生物顕微鏡

BA80C-6T3M

コンパクトな顕微鏡でありながら、
オプションの対物レンズ使用で最大1500倍まで対応可能！

大画面でもくっきり画像

※タブレット枠の色が、
白から黒に変更されて
います。

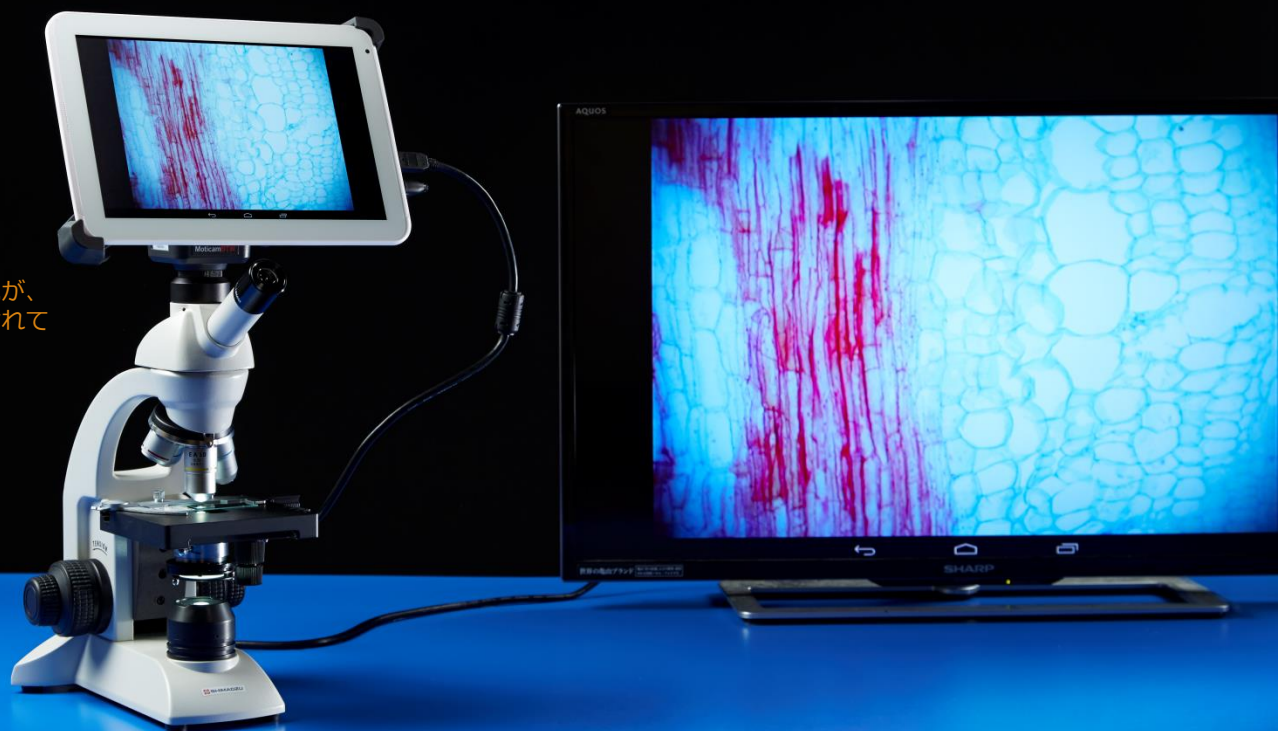

約500万
画素

大型
10インチ
モニタ

V鏡筒
カメラ交換も
カンタン

総合倍率
40~600x

LED照明
最長50時間
照明点灯可能



- 取り外し可能なAndroid**10インチタブレットモニター**搭載。
将来のタブレット交換が容易に可能。
- 顕微鏡とタブレットスコープの接続は、汎用性の高いCマウントカメラアダプタを使用。
- PCレスで画面表示と画像撮影（**約500万画素**）が可能。
- ライブ画像を**Wi-Fi**でタブレットやPC等へ送信し、受信側で映像の保存も可能。
- **HDMI出力**により大型モニタへ高精細顕鏡画像を提示可能。
（約200万画素）
- 8GB MicroSDHCカードを標準装備。
データの書き出しやアップデートに対応。
- USBメモリへのデータの書き出しが可能。（USBメモリ別売）
- モニタ画面上で計測も可能。*
画像保存形式は汎用性の高い【動画：MP4／静止画：Jpeg】
* 付属の校正用スライドで事前に校正が必要です。



※タブレット枠の色が、白から黒に変更されています。

Cat.No	114-3092	
形名	BA80C-6T3M	
価格	¥158,000 + 税	
顕微鏡部	総合倍率	40 ~ 600×
	接眼レンズ	WF10×/18mm WF15×/13mm 接眼マイクロメータ枠付き
	対物レンズ	アクリマート 4× 10× S40×
	鏡筒形式	単眼45°傾斜鏡筒 360°回転
	焦準装置	一軸式粗微動ハンドル 標本安全装置付き
	ステージ	一体型XYステージ
	照明装置	LED (充電式、連続調光式)
	大きさ・重さ	約W285×D230×H490mm 約5.1Kg
	電源	AC100-240V 50/60Hz (ACアダプタ)
	付属品	ダストカバー 六角レンチ (3種) ACアダプタ (顕微鏡本体用とデジタルカメラ部用各1個) Cマウントアダプタ (0.5×BA80専用) カメラダストキャップ 校正用スライド CD-R (MoticImagesPlus) MicroSDカード(4GB) HDMIケーブル (2m) Cマウントリング 予備LEDランプ
格納箱	-	
カメラ部	映像出力	Wi-Fi (802.11b/g/n) / HDMI / MicroSD (SDHC 32GBまで)
	イメージセンサ	1/2.5"型CMOS
	有効画素数*	USB : 接続時 2592×1944 (約500万画素) Wi-Fi : 接続時 1280×960 (約123万画素) HDMI : 1920×1080 (約200万画素)
	対応ソフト	Motic Images Plus MotiConnect (iOS、Android OS用)
	対応OS	Windows Vista / 7 / 8

*タブレット/本体の接続方法により異なります。

■ オプション

対物レンズ S100×-oil お問い合わせください

技術的なご相談は コールセンター ☎ 0120-376-673 FAX 03-6861-9419 E-mail soudan@shimadzu-rika.co.jp

株式会社 島津理化 <http://www.shimadzu-rika.co.jp/>

支店 東京 TEL 03-5626-0210 大阪 TEL 06-6375-2551
 営業所 札幌 TEL 011-758-0788 仙台 TEL 022-380-8950
 名古屋 TEL 052-571-9166 広島 TEL 082-504-6120
 福岡 TEL 092-271-1418
 海外ビジネス推進部 TEL 03-6861-9401

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 6-1-8