

フルスペック！コストパフォーマンス *model*

充電式の実体顕微鏡

VCT-VBL_eシリーズ

高倍率モデル

眼幅&左眼視度調節

VBL2e:360°回転式

(VBL1e:固定式)

LED落射ランプ

LED透過ランプ



フル充電で約50時間
連続使用可能！

場所を選ばずに使うことができ、
様々な場面で活躍します。


ABS樹脂製
丸型ステージ付属



コードが無いので
持ち運びも容易




エノコログサ(小穂)

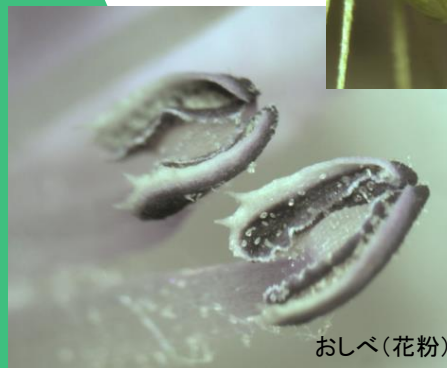

おしべ(花粉)

VCT-VBL2eにMoticam1000を装着して撮影(20×)

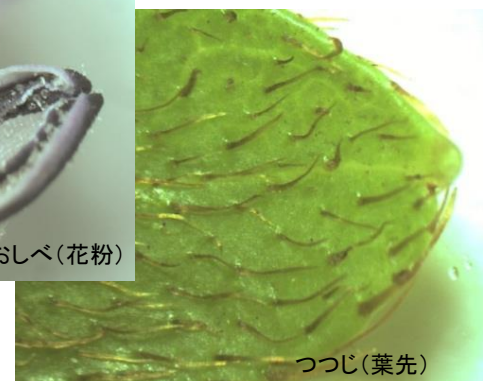

つつじ(葉先)

- 充電池を内蔵。フル充電で約50時間連続使用が可能です。
(実際は多少の自然放電があるため、使用時間は目安となります。)
- 光源に白色LEDを採用しており、従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で、色温度が自然光に近いいため観察像に影響を及ぼしません。
- 落射・透過・落射+透過の3種の照明方法が随時切り替えられます。
- 観察が容易に行える45°傾斜鏡筒は、左右の眼幅、左眼の視度を調節することができ、立体的な正立像を観察できます。
- VCT-VBL2eは、鏡筒が360°回転可能です。(VCT-VBL1eは固定式です。)
- 対物レンズは回転変倍式で、レンズを交換することなくワンタッチで20×・40×の倍率転換ができます。(VCT-VBL1eは180°回転式、VCT-VBL2eは90°回転式)
- 支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式で、岩石や植物の観察が容易に行えます。
- ABS樹脂製の丸型ステージは、皿としても利用できます。


| 形名 | VCT-VBL1e | VCT-VBL2e | VCT-VBL2eS |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|
| Cat.No | 114-787 (格納箱つき) | 114-788 (格納箱つき) | 114-791 (格納箱つき) |
| 価格 | ¥36,800 + 税 | ¥46,000 + 税 | ¥60,000 + 税 |
| 格納箱 | ● | ● | ● |
| Cat.No | 114-783 (格納箱なし) | 114-784 (格納箱なし) | 114-790 (格納箱なし) |
| 価格 | ¥29,800 + 税 | ¥39,000 + 税 | ¥53,000 + 税 |
| 格納箱 | — | — | — |
| 総合倍率 | 20×・40× | | 20×・40×・80× (オプションにて60×) |
| 接眼レンズ | WF10×/20mm 1対 | | WF10×/20mm WF20×/20mm 各1対 |
| 対物レンズ | 2×・4× 回転変倍式(180°回転) | 2×・4× 回転変倍式(90°回転) | |
| 鏡筒 | ジータントップ式 双眼45°傾斜鏡筒 固定式 | ジータントップ式 双眼45°傾斜鏡筒 360°回転 | |
| | 左眼視度調節 眼幅調節範囲:51~75mm 接眼スリーブ内径30mm | | |
| 焦準装置 | 支柱スライド/ラックピニオン2段方式 鏡筒上下動 | | |
| 作動距離 | 45mm | 75mm | |
| ステージ | 径80mm 丸型ステージ ABS樹脂製白黒別ステージ・ガラス製(透過照明用)各1式 | | |
| 照明装置 | 落射照明:LED5個 透過照明:LED1個 落射/透過/落射+透過 | | |
| 大きさ・重さ | W115×D187×H270mm 約2.5kg | W115×D187×H280mm 約2.5kg | |
| 付属品 | ACアダプタ 目当てゴム ビニルカバー 粗動用スパナ | | |


■ 補充部品 (共通)

| | | |
|--------|------------------|-------------|
| 190490 | 接眼レンズWF10× (2個組) | ¥12,000 + 税 |
| 196848 | LED落射ランプB | ¥1,800 + 税 |
| 196849 | LED透射ランプC | ¥1,800 + 税 |

■ オプション (共通)

| | | |
|---------|------------------|-------------|
| 190498 | 接眼レンズWF15× (2個組) | ¥14,000 + 税 |
| 190497 | 接眼レンズWF20× (2個組) | ¥14,000 + 税 |
| 114-092 | 木製格納箱 | ¥7,000 + 税 |
| 115-150 | 複式十字動載物装置XY-6S | ¥18,000 + 税 |

技術的なご相談は  0120-376-673 FAX 03-6854-0275 E-mail soudan@shimadzu-rika.co.jp

資料請求はこちらから 



株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東京 TEL 03-6854-0210 札幌 TEL 011-758-0788
 仙台 TEL 022-380-8950
 西日本営業部 大阪 TEL 06-6375-2551 名古屋 TEL 052-571-9166
 広島 TEL 082-207-3097 福岡 TEL 092-271-1418
 海外事業部 TEL 03-6854-0261

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル