

フルスペック！コストパフォーマンス *model*

充電式の実体顕微鏡

VCT-VBL<sub>e</sub>シリーズ

高倍率モデル

眼幅&左眼視度調節

VBL2e:360°回転式  
(VBL1e:固定式)

LED落射ランプ

LED透過ランプ



フル充電で約50時間  
連続使用可能！

場所を選ばずに使うことができ、  
様々な場面で活躍します。


ABS樹脂製  
丸型ステージ付属



コードが無いので  
持ち運びも容易




エノコログサ(小穂)

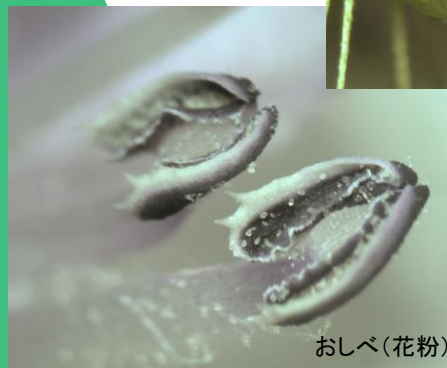

おしべ(花粉)

VCT-VBL2eにMoticam1000を装着して撮影(20×)

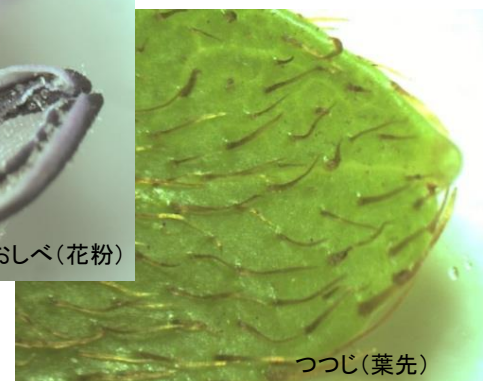

つつじ(葉先)

- 充電池を内蔵。フル充電で約50時間連続使用が可能です。  
(実際は多少の自然放電があるため、使用時間は目安となります。)
- 光源に白色LEDを採用しており、従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で、色温度が自然光に近いため観察像に影響を及ぼしません。
- 落射・透過・落射+透過の3種の照明方法が随時切り替えられます。
- 観察が容易に行える45°傾斜鏡筒は、左右の眼幅、左眼の視度を調節することができ、立体的な正立像を観察できます。
- VCT-VBL2eは、鏡筒が360°回転可能です。(VCT-VBL1eは固定式です。)
- 対物レンズは回転変倍式で、レンズを交換することなくワンタッチで20×・40×の倍率転換ができます。(VCT-VBL1eは180°回転式、VCT-VBL2eは90°回転式)
- 支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式で、岩石や植物の観察が容易に行えます。
- ABS樹脂製の丸型ステージは、皿としても利用できます。

| 形名     | VCT-VBL1e                                   | VCT-VBL2e               |
|--------|---|-------------------------|
| Cat.No | 114-787 (格納箱つき)                             | 114-788 (格納箱つき)         |
| 価格     | ¥38,300 (税別)                                | ¥47,500 (税別)            |
| 格納箱    | ●   | ●                       |
| Cat.No | 114-783 (格納箱なし)                             | 114-784 (格納箱なし)         |
| 価格     | ¥29,800 (税別)                                | ¥39,000 (税別)            |
| 格納箱    | —   | —                       |
| 総合倍率   | 20×・40×                                     |                         |
| 接眼レンズ  | WF10×/20mm 1対                               |                         |
| 対物レンズ  | 2×・4× 回転変倍式 (180°回転)                        | 2×・4× 回転変倍式 (90°回転)     |
| 鏡筒     | ジーテントップ式 双眼45°傾斜鏡筒 固定式                      |                         |
|        | 左眼視度調節 眼幅調節範囲:51~75mm 接眼スリーブ内径30mm          |                         |
| 焦準装置   | 支柱スライド/ラックピニオン2段方式 鏡筒上下動                    |                         |
| 作動距離   | 45mm  | 75mm                    |
| ステージ   | 径80mm 丸型ステージ ABS樹脂製白黒別ステージ・ガラス製 (透過照明用) 各1式 |                         |
| 照明装置   | 落射照明: LED5個 透過照明: LED1個 落射/透過/落射+透過         |                         |
| 大きさ・重さ | W115×D187×H270mm 約2.5kg                     | W115×D187×H280mm 約2.5kg |
| 付属品    | 接眼鏡用キャップ ACアダプタ 目当てゴム ダストカバー 粗動用スパナ         |                         |

#### ■ 補充部品(共通)

|        |                 |             |
|--------|-----------------|-------------|
| 190490 | 接眼レンズWF10×(2個組) | ¥12,000 + 税 |
| 196848 | LED落射ランプB       | ¥1,800 + 税  |
| 196849 | LED透射ランプC       | ¥1,800 + 税  |

#### ■ オプション(共通)

|         |                 |             |
|---------|-----------------|-------------|
| 190498  | 接眼レンズWF15×(2個組) | ¥14,000 + 税 |
| 190497  | 接眼レンズWF20×(2個組) | ¥14,000 + 税 |
| 114-094 | 木製格納箱           | ¥8,500 + 税  |
| 115-150 | 複式十字動載物装置XY-6S  | ¥18,000 + 税 |

技術的なご相談は ☎ 0120-376-673 FAX 03-6854-0275 E-mail soudan@shimadzu-rika.co.jp

資料請求はこちらから ➡



## 株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東京 TEL 03-6854-0210 札幌 TEL 011-758-0788  
 仙台 TEL 022-380-8950  
 西日本営業部 大阪 TEL 06-6375-2551 名古屋 TEL 052-857-9176  
 広島 TEL 082-207-3097 福岡 TEL 092-271-1418  
 海外事業部 TEL 03-6854-0261

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル