


パーソナル電源装置 “でんちくん” EPS-3

教科書
どおりの実験
をするのに
最適！



- 乾電池（2個分）の代わりとして使える電源装置です。
- 製品本体の右側にプラス端子，左側にマイナス端子が付いているので，回路に組み込みやすいデザインです。

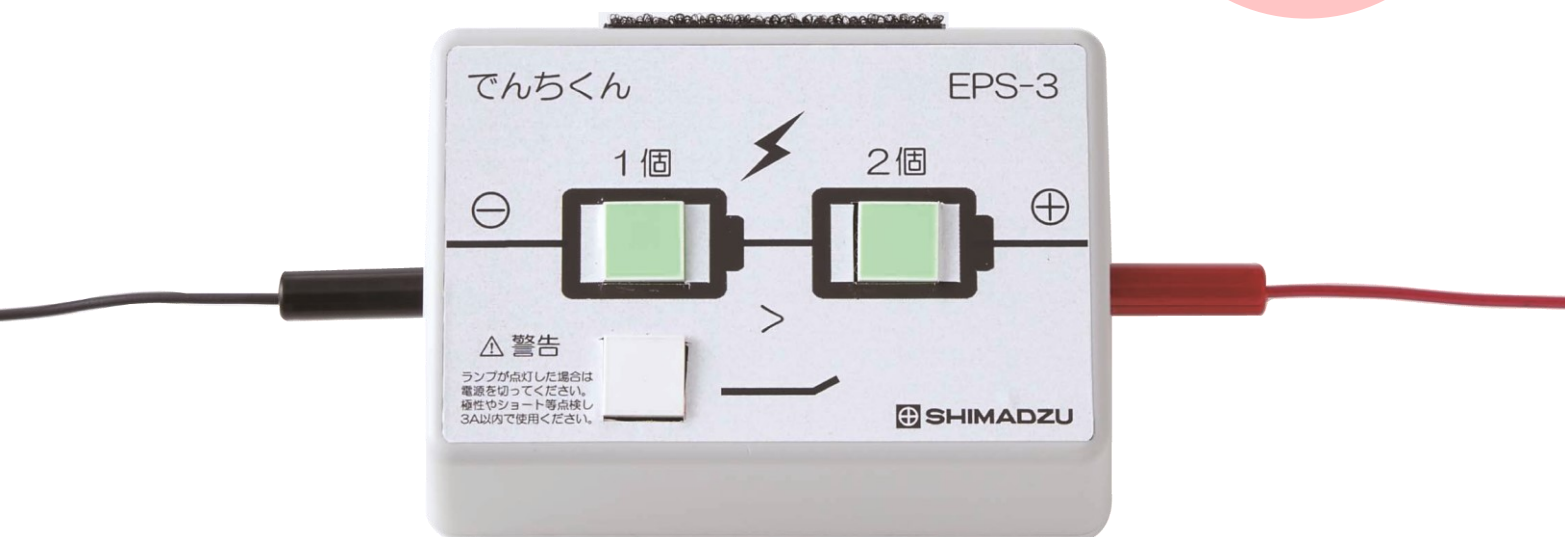

Point

警告・保護装置付き



ブザーと警告ランプで異常を知らせます。
* 警告ランプを押すと電源が切れます。



Point

コンパクト収納




付属のマジックテープで，ACアダプタを本
にくっ付けてコンパクトに保管できます。



実験例

電磁石を使った実験例


■ 乾電池 1 個分の時

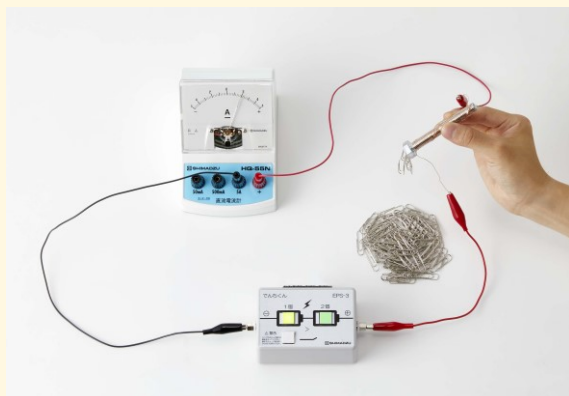


クリップが
少し付く



■ 乾電池2個分の時

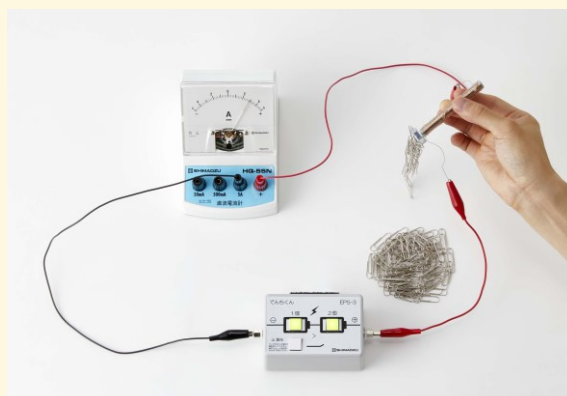

クリップが
沢山付く

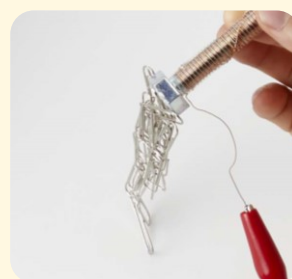

Cat.No	138-160
品 名	パーソナル電源装置 “でんちくん” EPS-3
価 格	¥16,000 (税込¥17,600)
出 力	DC1.5/3.0Vの2段階 最大3A
保護装置	過負荷保護 過電流保護 短絡保護 過昇温度保護
警 告	過電流保護装置作動時 ブザー音と警告ランプ点灯
電 源	専用ACアダプタ (12V 1.6A)
大きさ・重さ	W110×D70×H50mm 約0.5kg
付属品	ケーブルタイ 面ファスナー一式

* PSEマークは使用する専用ACアダプタで取得済です。

理科製品に関する技術的なご相談は島津理化 HP お問い合わせフォームから <https://www.shimadzu-rika.co.jp/contact/index.html>



株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東 京 TEL 03-6854-0210 札 幌 TEL 011-758-0788
仙 台 TEL 022-380-8950
西日本営業部 大 阪 TEL 06-6454-3133 名古屋 TEL 052-857-9176
福 岡 TEL 092-271-1418
理化教育事業部 TEL 03-6854-0274 海外事業部 TEL 03-6854-0261

本 社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル