

天井一括収納ユーティリティシステム

# UL-System

-Multi ceiling storage system for gas piping/power supply-


ガス・電力供給などのユーティリティを天井に一括収納  
効率的で見栄えの良い一括収納・配管システムが登場！



## 特長

- 各種ユーティリティを取り回しやすく一括配置し、ラボのレイアウト変更時に生じる再配管の手間を削減します。
- 従来足元に通していたガス・電気を天井に一括配置することで、移動しやすくレイアウト調整のしやすいラボを実現。
- 配管の一括化により、新規ラボ建造時の施工時間を短縮。もちろん既設ラボへの適用も可能です。

## ガス供給

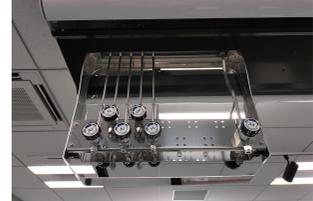

- あらかじめ設定された特殊ガスの供給と供給圧の調整が可能です。

## 電源供給




- 供給位置は手動で調整可能で、配線に煩わされません。100/200Vに対応します。


## オプション

- LAN用HUB
- スポットダクト
- センターポストダクト

## ■ 設置例

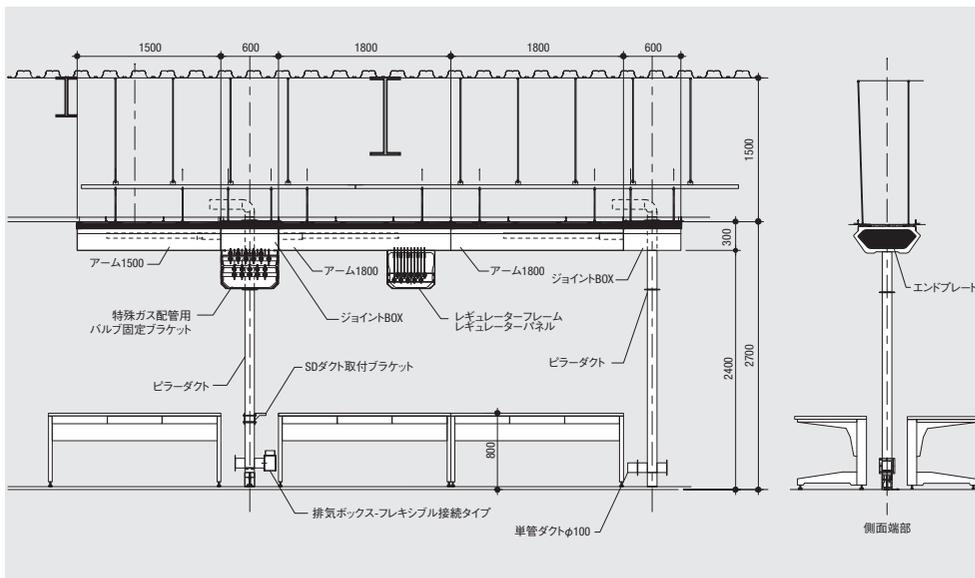

# UL-System 仕様

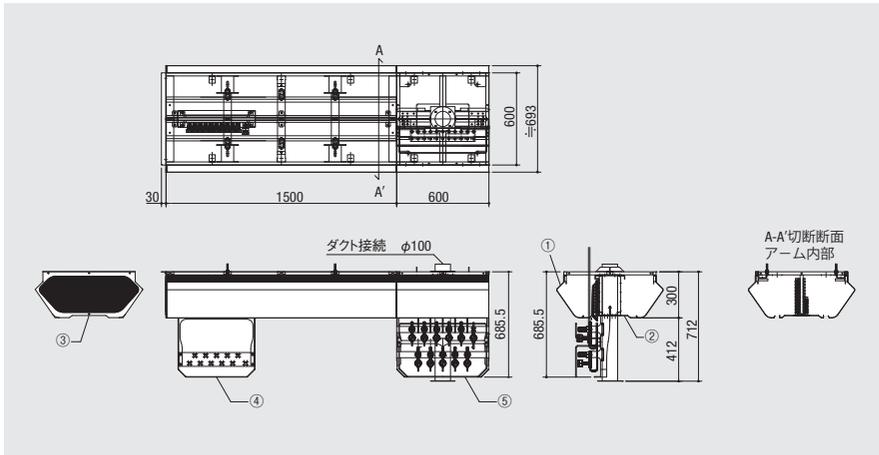

## 仕様

<b>本体</b>	フレーム：SUS 角パイプ
<b>本体外装</b>	①ウイング：アルミ製 白塗装+黒塗装化粧板貼り
	②底フタ：アルミ製 黒塗装
	③エンドプレート：アルミ製 白塗装+黒塗装化粧板貼り
<b>取付部品</b>	④バルブユニット フレーム：SUS 製
	⑤レギュレータユニット フレーム：SUS 製

# UL-System 設置イメージ



## <使用上の注意>

- バルブを開くときはバルブ機器メーカーの取扱い注意事項に従い慎重に順序良く開いてください。
- 電源を使用する場合には再度ブレーカーがONになっていることを確認すると同時に電源容量が間違っていないことを確認して接続してください。
- 排熱や排ミストの為にセンターポストダクトを使用する際は都度排気されていることを確認して使用してください。

技術的なご相談は  0120-376-673 FAX 03-6854-0275 E-mail soudan@shimadzu-rika.co.jp

資料請求は  
こちらから 



**株式会社 島津理化** <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東京 TEL 03-6854-0210 札幌 TEL 011-758-0788  
仙台 TEL 022-380-8950  
西日本営業部 大阪 TEL 06-6375-2551 名古屋 TEL 052-571-9166  
広島 TEL 082-504-6120 福岡 TEL 092-271-1418  
海外事業部 TEL 03-6854-0261

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル