

教科書ズバリ！の顕微鏡

生物顕微鏡 SGT-400E/M

接眼レンズ
WF10×

鏡筒
45°傾斜鏡筒
360°回転式

倍率：40～400×
ステージ上下タイプ
照明交換式

レボルバー

アーム

対物レンズ
4× 10× S40×

クリップ
(クレンメル)


角型ステージ

ピントを合わせるのに
便利な
目安シール
付き(剥がすことも可能)

SGT-400Eは
反射鏡とLED
ライトの交換式

回す方向
の間違い
を減らす
調節ねじ

天気が悪く、部屋が暗い時
などには、反射鏡ではなく照
明装置を使うこともできる。

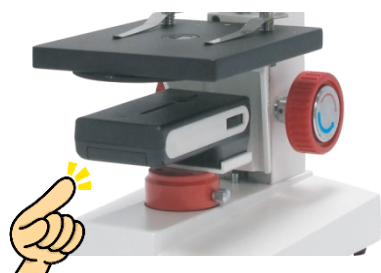

LEDライトに交換


顕微鏡
観察サポート
マニュアル付！



株式会社 島津理化


■ 回す方向の間違いを減らす工夫を施した調節ねじと、ピント合わせに便利な目安ライン

横から見ながら調節ねじを赤い矢印の方へ少しずつ回し、対物レンズとプレパラートをできるだけ近づける。




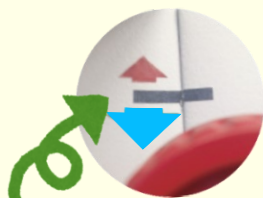


ピント合わせ用のライン*が直線になると良い。*目安はシールなので剥がすことも可能。

接眼レンズをのぞきながら調節ねじを青い矢印の方へ回し、対物レンズとプレパラートの間を少しずつ広げて、ピントを合わせる。

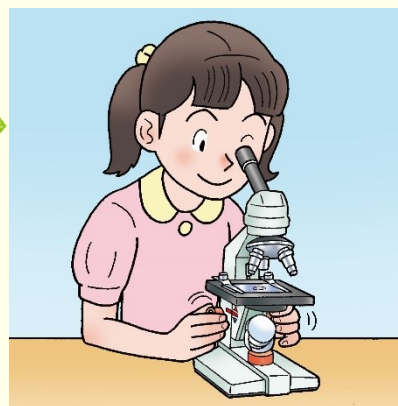

	反射鏡・LED交換式タイプ		反射鏡タイプ	
Cat.No	114-058	114-058B	114-059	114-059B
品 名	SGT-400E		SGT-400M	
価 格	¥32,000 (税込¥35,200)	¥48,400 (税込¥53,240)	¥30,000 (税込¥33,000)	¥46,000 (税込¥51,040)
総合倍率	40 ～ 400×			
接眼レンズ	WF10×/18mm			
対物レンズ	アクロマートレンズ 4× 10× S40×			
鏡筒形式	45°傾斜鏡筒 360°回転式			
焦準装置	ステージ上下 粗動 カラーハンドル 上下方向矢印付 焦準目安ライン 標本安全装置付			
ステージ	角形ステージ 固定式 メカニカルステージ固定用穴付 クレンメル			
照明装置	LED (充電式、連続調光式) 平凹反射鏡		平凹反射鏡	
大きさ・重さ	約W132×D171×H330mm 約2.5Kg		約W132×D171×H330mm 約2.4Kg	
電 源	AC100-240V 50/60Hz (ACアダプタ)		—	
付属品	接眼鏡用キャップ ダストカバー 粗動用スパナ 平凹両面反射鏡 顕微鏡観察サポートマニュアル ACアダプタ (SGT-400Eのみ)			
格納箱	—	●	—	●

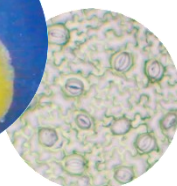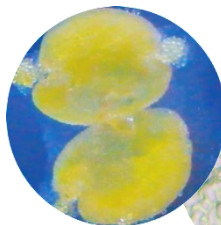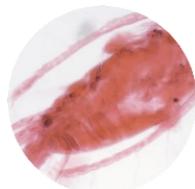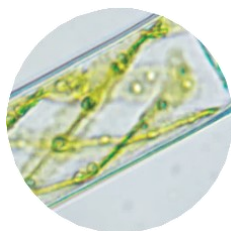

顕微鏡に関する技術的なご相談は ☎ 0120-376-673 FAX.03-6854-0275 E-mail : soudan@shimadzu-rika.co.jp

株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東 京 TEL 03-6854-0210 札 幌 TEL 011-758-0788
仙 台 TEL 022-380-8950
西日本営業部 大 阪 TEL 06-6454-3133 名古屋 TEL 052-857-9176
福 岡 TEL 092-271-1418
理化教育事業部 TEL 03-6854-0274 海外事業部 TEL 03-6854-0261

本 社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル