


パソコンに接続しなくてもマウスでカメラ機能を制御！
11.6インチ大型ディスプレイ搭載。

HDMIデジタルカメラシステム 11.6インチモニタ付

BMH-1080M Cat.No 115-485 価格 **¥265,000** + 税

- PC経由では表示できない**高速ライブ映像表示**が可能です。
- **保存画像とライブ画像を同時に表示**することが可能です。*SDカード（別売）が必要です。
- マウスを接続すれば、**PCに接続しなくても様々なカメラ制御がHDMIモニタ上で可能です。**（オンスクリーンディスプレイ機能については裏面参照）

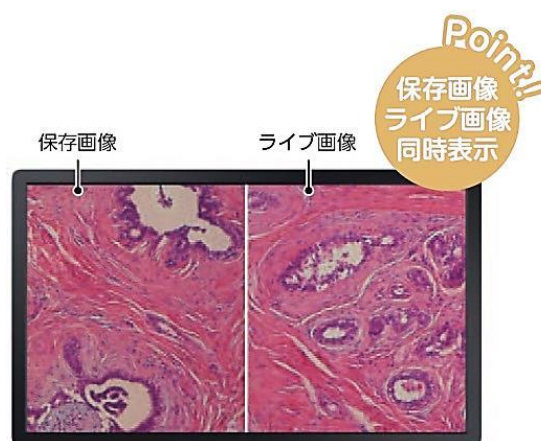

高速表示
秒60コマ

USB/HDMI
同時出力対応

SDカード
へ保存

PC出力
約200万


11.6インチ
大型
ディスプレイ

オン
スクリーン
ディスプレイ

2画面
同時表示
可能



- HDMIは、1080P（秒60コマ）の高速表示。
- SDカードスロット搭載。静止画や動画の保存が可能。（SDHCまで対応）
- SDカード（別売）データの読み出し表示。
- HDMI端子はフルサイズを採用し、耐久性もUP。
- USBマウスが標準付属。
- 保存画像とライブ画像を同時に表示し、HDMIモニタ上で2画面を比較することが可能。

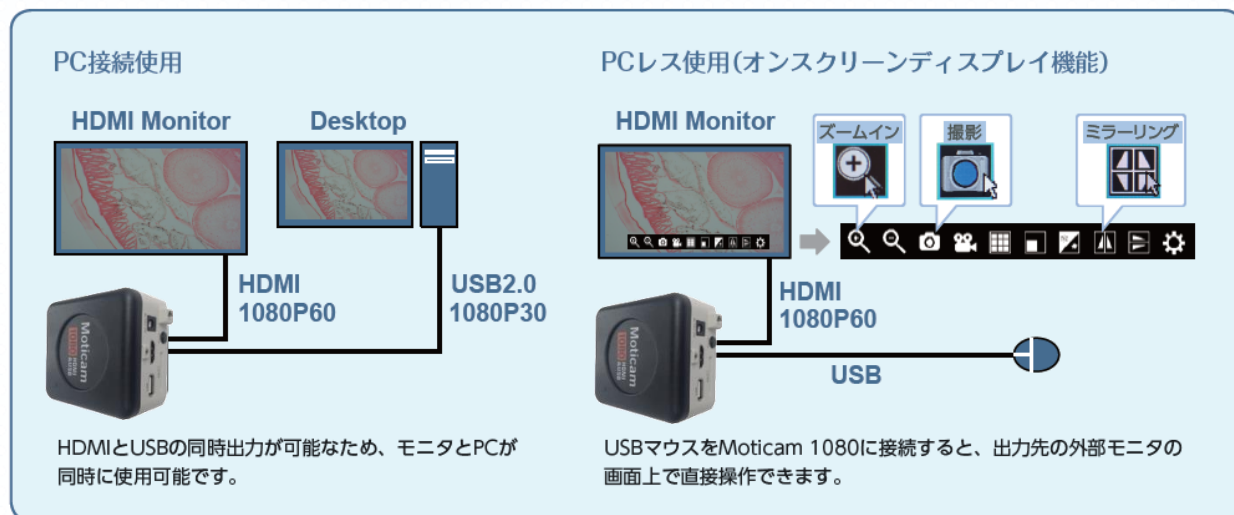

顕微鏡への取付けについて



Cat.No	115-485
形 名	BMH-1080M
価 格	¥265,000 + 税
デジタルカメラ	Moticam 1080
映像出力	USB2.0/3.0 HDMI SD (SDHC 32GBまで)
イメージセンサ	1/2.8"型CMOS
有効画素数	SD : 1920×1080 (約200万画素) HDMI : 1920×1080 1080P60 (約200万画素) USB : 1600×1200 1080P30 (約200万画素)
対応ソフト	Motic Images Plus
対応OS	Windows Vista / 7 / 8 / 10
モニタ	11.6インチ
付属品	ソフトウェア (Motic Images Plus) ダストキャップ 校正用スライド USBケーブル HDMIケーブル 電源アダプタ Cマウントリング USBマウス

- 顕微鏡三眼部（Cマウントアダプタ）へ取り付けが可能です。

注）BMH-1080Mは重さがあるため、取り付けられる顕微鏡は中型以上の顕微鏡モデルとなります。

技術的なご相談は ☎ 0120-376-673 FAX 03-6854-0275 E-mail soudan@shimadzu-rika.co.jp

資料請求はこちらから ➡



株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東 京 TEL 03-6854-0210 札 幌 TEL 011-758-0788
仙 台 TEL 022-380-8950
西日本営業部 大 阪 TEL 06-6375-2551 名古屋 TEL 052-857-9176
広 島 TEL 082-207-3097 福 岡 TEL 092-271-1418
海外事業部 TEL 03-6854-0261

本 社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル