

現在お使いの生物顕微鏡※を、簡単・低価格でデジタル生物顕微鏡にバージョンアップ！

※対応機種は島津理化のBAシリーズになります。下記「取付可能な生物顕微鏡」をご参照ください。

顕微鏡デジタルカメラユニット DMBA-50N-HS

*モニタ画像は、はめ込み合成画像です。

大画面での顕微鏡画像で生徒の理解度・好奇心をアップ！

HDMI出力を搭載しているため、HDMIケーブルを繋ぐだけでテレビやパソコンモニタに顕微鏡画像を映し出せます。

効果的な授業をアシスト！

USB出力とHDMI出力が同時に可能なため、パソコンに映しながら、HDMI出力でテレビにも映し出すことで、先生側/生徒側の2画面で使用できます。




鏡筒部分を取り変えるだけでOK!



※顕微鏡本体と接眼レンズは付属しません。

■取付可能な生物顕微鏡

BA50/50C	DMBA-50	BA60	BA80/80C	BA81シリーズ
写真はBA50			写真はBA80	写真は単眼タイプ

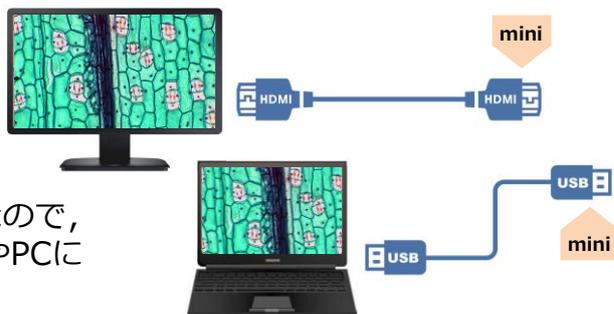

デジタルカメラユニットの背面

■ USBとHDMI出力が**同時**に可能なので、生物顕微鏡の画像を大型モニタやPCに同時に表示でき便利です。

■ PCで画像保存も出来ます。

■ PCではスケールバー入りの写真撮影が可能です。また、撮影した画像で計測も可能です。(要校正作業)

■ 取り付けはネジをゆるめて取り換えるだけでOK。だれでも簡単に交換できます。



ネジ（または六角レンチ）を回して鏡筒を取り外します。

顕微鏡デジタルカメラユニットを取り付けてネジを締めます。

ホコリが入らない様に要注意！

この機会に接眼レンズの表面も無水エタノールで清掃して、クリアな視界にしましょう！

顕微鏡の清掃方法はここから



Cat.No	114-396
形名	DMBA-50N-HS
価格	¥75,000 (税込¥82,500)
映像出力	USB2.0/3.0 HDMI (同時出力可)
イメージセンサ	2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサ
有効画素数	HDMI：約200万画素 USB：約200万画素
対応ソフト	Motic Images Plus
対応OS	Windows Vista / 7 / 8 / 10 (すべてのパソコンにおいて動作を保証するものではありません)
付属品	六角レンチ (0.9/2.0mm 2種) ACアダプタ 予備LED ソフトウェア(Motic Images Plus)校正用スライド USBケーブル (1m) HDMIケーブル (2m) USB電源アダプタ

※付属品は不要で、デジタルカメラユニット本体のみをご希望の場合は、販売店へご連絡ください。



DMBA-50N-H 本体



付属品

顕微鏡に関する技術的なご相談は ☎ 0120-376-673 FAX.03-6854-0275 E-mail : soudan@shimadzu-rika.co.jp

株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東京 TEL 03-6854-0210 札幌 TEL 011-758-0788
仙台 TEL 022-380-8950
西日本営業部 大阪 TEL 06-6375-2551 名古屋 TEL 052-857-9176
福岡 TEL 092-271-1418
海外事業部 TEL 03-6854-0261

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル