

HDMIデジタルマイクロスコープ BA81-6/15T-4000BMH

生物顕微鏡

4K対応デジタルカメラに11.6インチの大型ディスプレイを搭載！


粗微動一軸式の焦準ハンドルとXYステージ体型ボディに、
高コントラスト対物レンズを搭載した生物顕微鏡。

**保存画像/
ライブ画像
の同時表示
が可能**

**11.6インチ
大型モニタ**

(このモニタは4Kではありません)

約**830万**画素
の高精細画像の
提示が可能

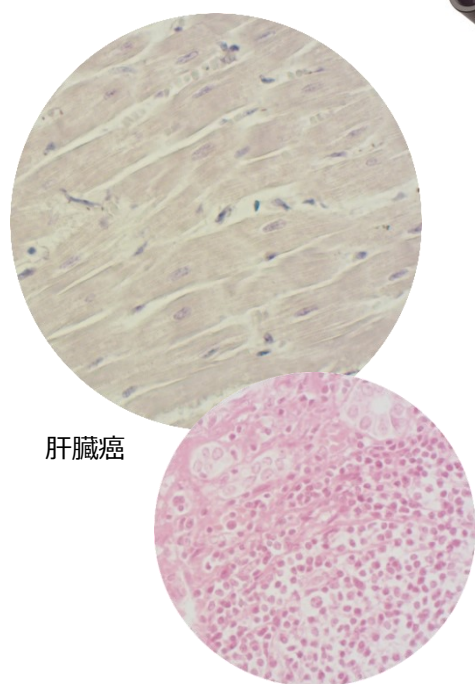

肝臓癌

筋肉組織



Cat.No		114-3114	114-3084
形 名		BA81-6T-4000BMH	BA81-15T-4000BMH
価 格		¥489,800 (税込¥538,780)	¥504,800 (税込¥555,280)
顕 微 鏡 部	総合倍率	40 ～ 600×	40 ～ 1500×
	接眼レンズ	WF10×/18mm WF15×/13mm	各2個 マイクロメータ取付枠つき
	対物レンズ	アクロマートスーパーコントラスト対物レンズ (ASC) 4× 10× S40	アクロマートスーパーコントラスト対物レンズ (ASC) 4× 10× S40 S100×-oil
	鏡筒形式	ジードントップ式 30°傾斜三眼鏡筒 360°度回転 左目視度調節可能 眼幅調整可能 (55～75mm) 接眼スリーブ内径23.2mm	
	焦準装置	ラックピニオン式粗動 精密ギア式微動 ステージ上下動 一軸式粗微動ハンドル 微動最小目盛2μm 標本安全装置つき	
	ステージ	移動距離：左右75mm 前後26mm 縦一軸XY操作ハンドル 一体型メカステージ	
	照明装置	LED (充電式、連続調光式)	
	大きさ・重さ	顕微鏡本体：約W180×D333×H350mm 約4.9kg	
カ メ ラ 部	映像出力	USB2.0/3.0 HDMI USBメモリ SD *USBメモリ・SDカードは別売です	
	イメージセンサ	1/1.8"型CMOS	
	有効画素数	USB：3840×2160 (約830万画素) HDMI：3840×2160 (約830万画素) SD：3840×2160 (約830万画素)	
	対応ソフト	Motic Images Plus	
	対応OS	Windows 10 / 11	
付属品		接眼鏡用キャップ 三眼部キャップ ダストカバー (顕微鏡本体用) 六角レンチ (3種) 油浸オイル ACアダプタ (顕微鏡本体用とデジタルカメラ部用各1個) 予備LED ソフトウェア (MoticImagesPlus) ダストキャップ 校正用スライド USBケーブル HDMIケーブル (2m) Cマウントリング Cマウントアダプタ (0.65×) USBマウス	

※ モニタを搭載した状態でカバーをする場合は、オプションの「ダストカバー モニタ搭載顕微鏡用」をお買い求めください。

- 4K対応、ウルトラハイビジョン(829万画素)で細部の表現と自然な色の再現性を実現。
- マウスを使って様々なカメラ制御機能が操作可能。
- 11.6インチ大型ディスプレイ搭載。
- SDカード/USBメモリを使用して静止画や動画の保存が可能。
- 出力形式は4種類(HDMI、USBメモリ、SDカード、PC)
- ジードントップ式鏡筒で、眼幅調整の際に面倒な調整が必要ありません。
- LED 照明装置は充電式で、連続調光が可能。



対物レンズは、視野全体をクリアに観察できる高級タイプスーパーアクロマートレンズです。



一軸式の粗微動焦準ハンドルと標本移動ハンドルにより、操作が快適です。



焦準ハンドルにテンション調節リングを搭載。工具なしで簡単に調整できます。

■ 補充部品

190514	接眼レンズ WF10×	¥7,200 (税込 ¥7,920)
190515	接眼レンズ WF15×	¥8,000 (税込 ¥8,800)
190580	対物レンズ ASC4×	¥7,200 (税込 ¥7,920)
190581	対物レンズ ASC10×	¥8,200 (税込 ¥9,020)
190582	対物レンズ ASC40×	¥15,000 (税込 ¥16,500)
190826	対物レンズ ASC60×	¥21,000 (税込 ¥23,100)
190583	対物レンズ ASC100×-oil	¥23,000 (税込 ¥25,300)
190035	ACアダプタ	¥3,900 (税込 ¥4,290)
196856	LEDランプA	¥1,600 (税込 ¥1,760)
190117	油浸オイル (5mL)	¥1,200 (税込 ¥1,320)

■ オプション

190004	ダストカバー モニタ搭載顕微鏡用	¥1,800 (税込 ¥1,980)
--------	------------------	---------------------

顕微鏡に関する技術的なご相談は ☎ 0120-376-673 FAX.03-6854-0275 E-mail：soudan@shimadzu-rika.co.jp

株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

理化教育事業部 TEL 03-6854-0274

支 店 東 京 TEL 03-6854-0210 大 阪 TEL 06-6454-3133
営業所 札 幌 TEL 011-758-0788 仙 台 TEL 022-380-8950
名古屋 TEL 052-857-9176 福 岡 TEL 092-271-1418

海外事業部 TEL 03-6854-0261

本 社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル