



倒立金属顕微鏡 AE2000MET

明／暗視野，長作動距離仕様の金属顕微鏡

ステージは15kg耐荷重のため重い物でも観察できます。
23mmの広視野接眼レンズを採用し，観察効率が向上しています。



各種金属の表面観察画像

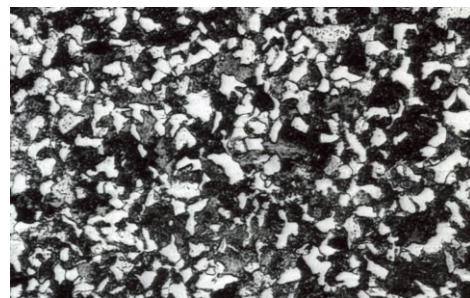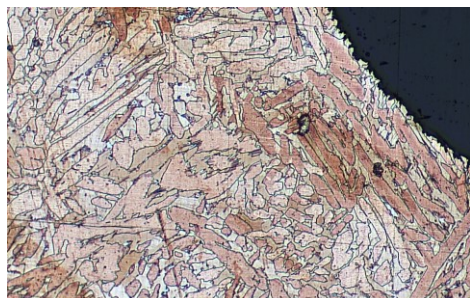


Cat.No	114-912
形 名	AE2000MET
価 格	¥1,228,000 (税込¥1,350,800)
総合倍率	50 ~ 500×
接眼レンズ	WF10×/23mm マイクロメータ取付枠付 (25mm)
対物レンズ	明/暗視野 ブランアクロマト LWD (長焦点) 5× 10× 20× 50×
鏡筒形式	三眼 45°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径30mm 三眼分配比率 20 : 80
焦準装置	ラックピニオン式粗動 微動装置 レボルバ上下動式
ステージ	XYステージ 大きさ: 280×180mm 移動距離: 50×50mm
照明装置	ハロゲン 100W
大きさ・重さ	約W280×D693×H361mm 約13kg
電 源	AC100-240V 50/60Hz
付属品	接眼鏡用キャップ 三眼部キャップ ダストカバー 六角レンチ (2.5mm) ACアダプタ 予備ハロゲン球 ブルーフィルタ 水滴型穴開きプレート

長焦点LWD対物レンズを搭載しています。



明視野 Bright Field (BF) ・暗視野 Dark Field (DF) がワンタッチで切り替え可能。暗視野／明視野切換え時に自動的に光量を一旦落とす目に優しい設計です。

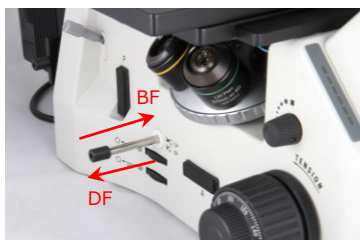

LED照明、自動ON / OFF機能付き。人感センサーを装備。通電時に離席すれば一定時間でスリープモードにはいります。



■ オプション

190064 焦準調整付 Cマウントカメラアダプタ	0.5×	¥34,000 (税込 ¥37,400)
190065 焦準調整付 Cマウントカメラアダプタ	0.65×	¥34,000 (税込 ¥37,400)
196838 Cマウントカメラアダプタ	1×	¥22,800 (税込 ¥25,080)
190066 焦準調整付 Cマウントアダプタ	0.35×	¥48,000 (税込 ¥52,800)

AE2000METに顕微鏡デジタルカメラ
Moticam 4000BMHを搭載

HDMIデジタルマイクロスコープ
AE2000MET-4000BMH

Cat.No.114-9124 ¥1,587,800 (税込¥1,746,580)

- ・4K対応、ウルトラハイビジョン(829万画素)で細部の表現と自然な色の再現性を実現。
- ・マウスを使って様々なカメラ制御機能が操作可能。
- ・11.6インチ大型ディスプレイ搭載。
- ・SDカード/USBメモリを使用して静止画や動画の保存が可能。
- ・出力形式は4種類(HDMI、USBメモリ、SDカード、PC)



約830万画素
の高精細画像の
提示が可能

顕微鏡に関する技術的なご相談は ☎ 0120-376-673 FAX.03-6854-0275 E-mail : soudan@shimadzu-rika.co.jp

株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東 京 TEL 03-6854-0210 札 幌 TEL 011-758-0788
仙 台 TEL 022-380-8950
西日本営業部 大 阪 TEL 06-6454-3133 名古屋 TEL 052-857-9176
福 岡 TEL 092-271-1418
理化教育事業部 TEL 03-6854-0274 海外事業部 TEL 03-6854-0261

本 社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル