

■STZ-161シリーズ

Cat.No	114-871	114-874
形 名	STZ-161-TLED	STZ-161-TP
		
価 格	¥158,000 (税込¥173,800)	¥128,000 (税込¥140,800)
総合倍率	7.5× ～ 45× (ズーム式)	
接眼レンズ	WF10×/20mm 接眼マイクロメータ取付枠つき	
対物レンズ	0.75×～4.5× (鏡筒内ズーム式) ズーム比1：6	
鏡 筒	三眼 45°傾斜鏡筒 360°回転式	
焦準装置	ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド (ねじ固定)	
作動距離	110mm (補助対物レンズ非装着時)	
ステージ	本体220×237mm (突起部含む) 白黒丸ステージ 大きさ：Φ80mm クレンメル	220×280mm
照明装置	LED (連続調光式) 落射/透過	－
大きさ・重さ	約W170×D310×H400mm 約3.9kg	約W220×D313×H367mm 約3.4kg
付 属 品	三眼部キャップ 目当てゴム ダストカバー 六角レンチ (2.5mm) ACアダプタ ステージ円板 (白黒、ガラス)	三眼部キャップ 目当てゴム ダストカバー 六角レンチ (2.5mm)

■STZ-171シリーズ

Cat.No	114-881	114-884
形 名	STZ-171-TLED	STZ-171-TP
		
価 格	¥213,000 (税込¥234,300)	¥153,000 (税込¥168,300)
総合倍率	7.5× ～ 50× (ズーム式)	
接眼レンズ	WF10×/23mm 接眼マイクロメータ取付枠つき	
対物レンズ	0.75×～5× (鏡筒内ズーム式) ズーム比1：6.7	
鏡 筒	三眼 45°傾斜鏡筒 360°回転式	
焦準装置	ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド (ねじ固定)	
作動距離	110mm (補助対物レンズ非装着時)	
ステージ	本体239×303mm (突起部含む) 白黒丸ステージ 大きさ：Φ95mm クレンメル	
照明装置	LED (独立式ON/OFF/連続調光式) 落射/透過	－
大きさ・重さ	約W225×D340×H390mm 約5.5kg	約W225×D340×H365mm 約4.7kg
付 属 品	三眼部キャップ 目当てゴム ダストカバー 六角レンチ (2.5mm) ACアダプタ ステージ円板 (白黒、ガラス)	三眼部キャップ 目当てゴム ダストカバー 六角レンチ (2.5mm) ステージ円板 (白黒)

▼STZ-161・171シリーズは、各種顕微鏡デジタルシステムとの組み合わせで、静止画・動画撮影や大型モニタへの出力も可能です。

HDMIデジタルマイクロスコープ
STZ-161-TLED-4000BMH
¥517,800 (税込¥569,580)



HDMIデジタルマイクロスコープ
STZ-171-TLED-4000BMH
¥572,800 (税込¥630,080)



顕微鏡に関する技術的なご相談は  0120-376-673 FAX.03-6854-0275 E-mail：soudan@shimadzu-rika.co.jp



株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東 京 TEL 03-6854-0210 札 幌 TEL 011-758-0788
仙 台 TEL 022-380-8950
西日本営業部 大 阪 TEL 06-6454-3133 名古屋 TEL 052-857-9176
福 岡 TEL 092-271-1418
理化教育事業部 TEL 03-6854-0274 海外事業部 TEL 03-6854-0261

本 社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル



Stereo Microscopes
三眼実体顕微鏡
STZ-161・171シリーズ

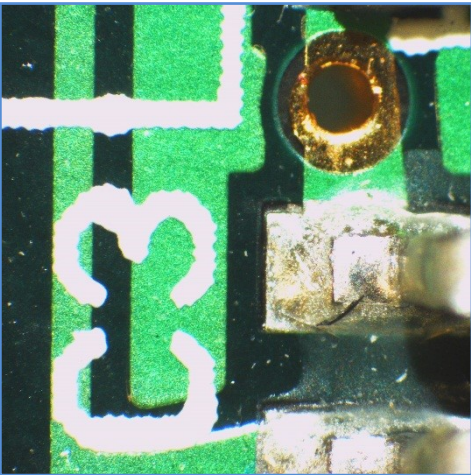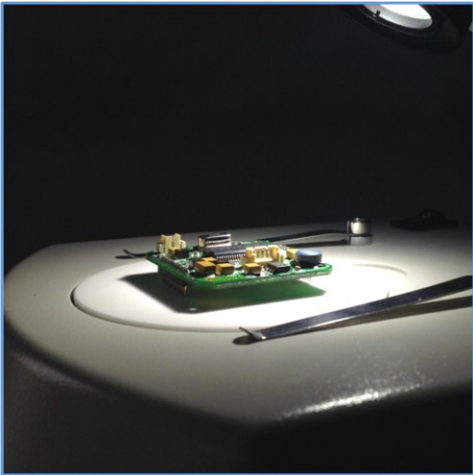

株式会社 島津理化

視野も広く、観察しながらの実習や作業に最適な三眼実体顕微鏡。

正立画像で立体的に観察でき、肉眼で見る感覚のまま拡大。迫力ある観察が可能です。
生物も生きたままシャーレに入れてそのまま観察可能。バイオ関連、工業・品質検査関連等、用途は多彩です。

■STZ-161シリーズ

総合倍率：7.5×～45×

114-871
STZ-161-TLED 照明付き
¥158,000 (税込¥173,800)

114-874
STZ-161-TP 照明なし
¥128,000 (税込¥140,800)



STZ-161-TLEDはLED落射/透過照明を標準搭載。
作動距離が従来型より広くなり、使いやすくなりました（80mm→110mm）。


照明無しモデルのSTZ-161-TPは、広い作業スペースを確保しています。オプションでリング照明と組み合わせることで観察の幅が広がります。

■STZ-171シリーズ

総合倍率：7.5×～50×


114-881
STZ-171-TLED 照明付き
¥213,000 (税込¥234,300)

114-884
STZ-171-TP 照明なし
¥153,000 (税込¥168,300)

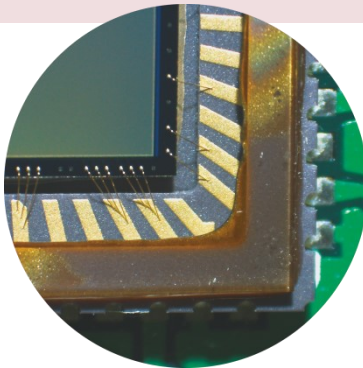


STZ-171-TLEDはLED落射/透過の独立光量調節機能付きで、様々な観察に対応可能。透過照明は反射板拡散方式を採用し、光源のムラを低減させました。

照明やファイバー照明と組み合わせて照射角度を変えたり、各種フィルターと組み合わせることで観察の幅が広がります。高級顕微鏡BAシリーズ光学系設計を実体顕微鏡に採用し、光学性能をアップしました。

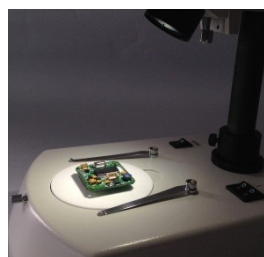

●STZ-161-TLEDはLED落射/透過照明を搭載しております。

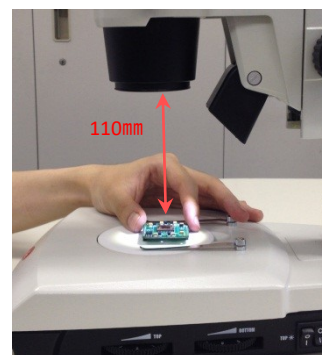


●ワイドなズームにもかかわらず、110mmの広い作動距離を実現。繊細で複雑な動きが要求される作業も、スムーズに行えます。（STZ-161/171シリーズ共通）




●「ズーム式対物レンズ」ズーム比率がワンタッチで調整可能です。（STZ-161/171シリーズ共通）



●ワンタッチ操作(回転式)の光路切替つまみがついています。（STZ-161/171シリーズ共通）

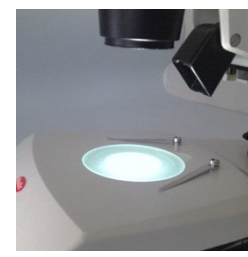

●STZ-171-TLEDはLED落射/透過照明を搭載。独立光量調節機能付きなので、用途によって使い分けることができます。

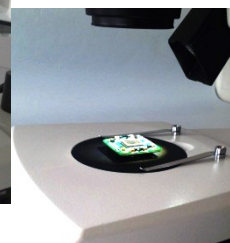

STZ-171-TLEDの独立光量調節部



●STZ-171-TLEDは透過光反射拡散板の角度が変更可能。サンプルに合わせて調整できます。